



Cuidando los Audífonos de su Niño/a

por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP

¿Por qué es importante revisar los audífonos diariamente?

Un audífono es un dispositivo que hace que los sonidos sean más altos para una persona quien tiene una pérdida auditiva. Un molde sucio de la oreja, la humedad dentro del molde de la oreja o en el tubo, quebraduras en la caja del audífono, partes sueltas, u otros problemas pueden afectar la habilidad para que el audífono funcione mejor. Cuando el audífono de su niño/a no trabaja apropiadamente, éste no le da la mejor ayuda que es capaz de proveer. Si usted revisa los audífonos de su niño/a todos los días, usted podrá identificar problemas en cuanto surjan.

En adición de revisar los audífonos de su niño/a diariamente, usted también debe hacer visitas regulares a su audiólogo o proveedor de audífonos para el mantenimiento rutinario. Su audiólogo o proveedor de audífonos podrá evaluar los audífonos de su niño/a usando un equipo especializado y verificará que el molde(s) le servirá a la oreja de su niño/a correctamente. En adición, él/ella puede demostrarle cómo debe cuidar los audífonos de su niño/a y responder cualquier otra pregunta.




¿Qué debes revisar?

El audiólogo o proveedor de los audífonos puede demostrarle a usted cómo revisar el audífono que su niño/a usa en específico. Abajo hay algunas cosas generales, según adaptadas de la Asociación Americana del Habla-Lenguaje y Audición (ASHA, por su sigla en inglés, 2011), que usted debe buscar cuando revise diariamente los audífonos de su niño/a.

- **Inspeccione el audífono para quebraduras, falta de piezas, o piezas sucias.** El audífono no debe tener quebraduras o agujeros. El molde de la oreja y el tubo deben ser atados firmemente a la unidad del audífono. El molde de la oreja no debe estar sucio o roto. Si el audífono está sucio, use un pedazo de tela suave y seca para limpiarlo. Si el audífono está roto, devuélvalo a su audiólogo o proveedor de audífonos para repararlo.
- **Busque la humedad.** Los audífonos muchas veces son puestos en lugares mojados o húmedos. Debido a esto, la humedad puede acumularse en el tubo del audífono, el gancho de la oreja, o el molde de la oreja. La acumulación de humedad puede

ser quitada usando un secador de mano o al poner el audífono en un recipiente especializado para secarlo.

- **Revise para la acumulación de cerumen.** Como la humedad, el cerumen en el oído puede acumularse en el audífono y bloquear sonidos. Usted puede quitar el cerumen del oído de algunas partes del audífono (como los moldes de la oreja) usando una herramienta especializada. Chequee con su audiólogo o proveedor de servicios de audífonos para saber cuándo usted debe tratar de quitar el cerumen acumulado o cuándo debes traer la unidad para repararla.
- **Ponga la batería/pila a prueba.** Cuán largo la batería/pila trabaja depende en muchos factores como el tipo de batería/pila, el tamaño del audífono, y cuán frecuente el audífono es usado. Use un probador de baterías/pilas para verificar la fortaleza de ella. Reemplace la batería/pila si no está funcionando con toda su fortaleza.
- **Escuche para la realimentación.** La *realimentación* es el tono alto del silbido que es creado cuando el sonido que sale del audífono retrocede hacia el micrófono del audífono. La realimentación puede ser causada por un molde de la oreja que no cabe apropiadamente, demasiado cerumen en el canal del oído, tubos quebrados, o algunos otros factores. Reduciendo el volumen del audífono puede reducir la realimentación, sin embargo puede también reducir la efectividad del audífono. Si la realimentación es un problema constante, hable con su audiólogo o proveedor de servicio de audífonos acerca de lo que usted puede hacer para eliminar la realimentación.

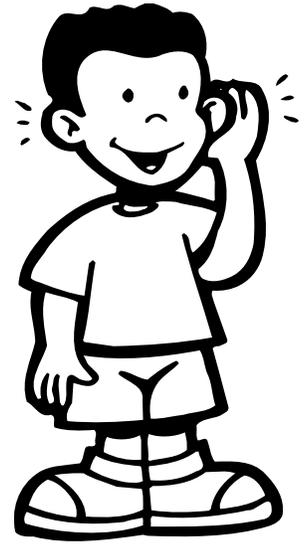

Recurso

American Speech-Language-Hearing Association. (2011). *Daily care for the hearing aid*. Retrieved from <http://www.asha.org/public/hearing/Daily-Care-for-the-Hearing-Aid/>

Para más páginas educativas (Handy Handouts®), visite www.handyhandouts.com.

Productos Serviciales

La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje con niños que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el nombre o el código de la mercancía en [nuestro buscador informático \(search\)](#). Haz "clic" en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de cada producto.

Webber® HearBuilder® Following Directions – Home Edition
Artículo #HBHE-122

Webber® HearBuilder® Phonological Awareness – Home Edition
Artículo #HBHE-244

Webber® HearBuilder® Sequencing – Home Edition
Artículo #HBHE-488

Funzee™ Everyday Sounds Software
Artículo #FZCD-710

*Las páginas educativas (Handy Handouts®) de Super Duper® son para el uso personal y educacional solamente. Cualquier uso comercial es estrictamente prohibido.